


LD Prof-Plus

STETOSKOP LD Návod k použití

LD PROF-PLUS

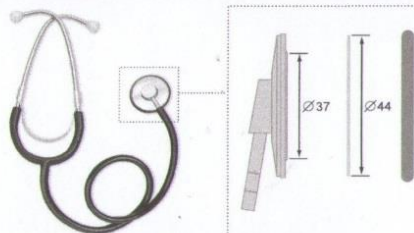


Popis: stetoskop LD Prof-Plus je fonendoskop pro poslech Korotkovových zvuků, který se skládá z hlavice ve tvaru diafragmy s plastovou membránou, spojovací trubice, binaurálních trubic a nástavců do uší.

Obsah balení:

- Hlavice k stetoskopu (LD-S025) z lehkého kovu s membránou (LD-S023) o průměru 44 mm - 1 kus.
- Trubice zdravotnická spojovací (LD-S020) o délce 56 cm (možné barvy dodávaných trubic: černá, šedá, červená, modrá, fialová, zelená, žlutá) - 1 kus.
- Binaurální trubice (LD-S019) - 1 kus.
- Nástavce do uší (LD-S066) - 1 komplet.

Rozměry v balení, mm 230 x 120 x 22
Hmotnost bez balení, g: 76

LD PROF-I

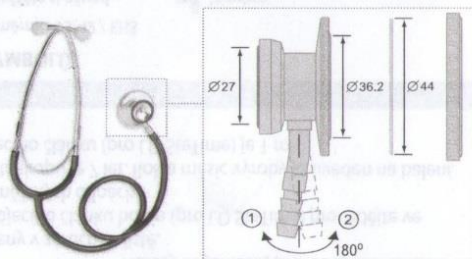

Popis: stetoskop LD Prof-I je fonendoskop pro lékaře a střední zdravotnický personál, který se skládá z oboustranné hlavice ve tvaru diafragmy s plastovou membránou a otevřeným zvonek, spojovací trubice, binaurálních trubic a nástavců do uší.

Obsah balení:

- Hlavice k stetoskopu (LD-S017) - oboustranná z lehkého kovu s velkou diafragmou a otevřeným zvonek - 1 kus. Průměr membrány (LD-S023) - 44 mm. Zvon hlavice má kontaktní gumový kroužek. Průměr zvonu 27


mm. Jednoduchý a pohodlný mechanismus pro přepínání mezi zvonek a diafragmou otáčením hlavice kolem osového ventilu o 180 stupňů. Poloha osového ventilu označuje pracovní stranu hlavice. Pozice 1 uvádí do provozu diafragmu, pozice 2 uvádí do provozu zvon.

- Trubice zdravotnická spojovací (LD-S020) o délce 56 cm (možné barvy dodávaných trubic: černá, šedá, červená, modrá, fialová, zelená, žlutá) - 1 kus.
- Binaurální trubice (LD-S019) - 1 kus.
- Nástavce do uší (LD-S066) - 1 komplet.

Rozměry v balení, mm 230 x 120 x 22

Hmotnost bez balení, g: 135

LD PROF-II

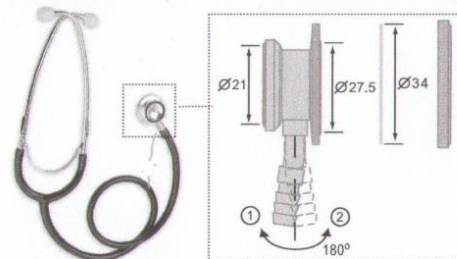

Popis: stetoskop LD Prof-II je specializovaný neonatální fonendoskop, který se skládá z oboustranné hlavice ve tvaru diafragmy s plastovou membránou a otevřeného zvonu, spojovací trubice, binaurálních trubic a nástavců do uší.


Obsah balení:

- Hlavice k stetoskopu (LD-S028) oboustranná z lehkého kovu s malou diafragmou a malým zvonek - 1 kus. Průměr membrány (LD-S024) - 34 mm, průměr zvonu - 21 mm. Jednoduchý a pohodlný mechanismus pro přepínání mezi diafragmou a zvonek otáčením hlavice kolem osového ventilu o 180 stupňů. Poloha osového ventilu označuje pracovní stranu hlavice. Pozice 1 uvádí do provozu diafragmu, pozice 2 uvádí do provozu zvon.
- Trubice zdravotnická spojovací (LD-S020) o délce 56 cm (možné barvy dodávaných trubic: černá, červená, modrá, fialová, zelená) - 1 kus.
- Binaurální trubice (LD-S019) - 1 kus.
- Nástavce do uší (LD-S066) - 1 komplet.

Rozměry v balení, mm: 240 x 110 x 40

Hmotnost bez balení, g: 95

LD PROF-III

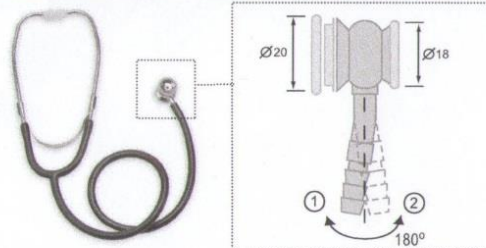

Popis: stetoskop LD Prof-III je specializovaný neonatální fonendoskop, který se skládá z oboustranné hlavice ve tvaru diafragmy s plastovou membránou a otevřeného zvonu, spojovací trubice, binaurálních trubic a nástavců do uší.


Obsah balení:

- Hlavice k stetoskopu (LD-S037) oboustranná z lehkého kovu s malou diafragmou a malým zvonek - 1 kus. Průměr membrány (LD-S040) - 20 mm, průměr zvonu - 18 mm. Jednoduchý a pohodlný mechanismus pro přepínání mezi diafragmou a zvonek otáčením hlavice kolem osového ventilu o 180 stupňů. Poloha osového ventilu označuje pracovní stranu hlavice. Pozice 1 uvádí do provozu diafragmu, pozice 2 uvádí do provozu zvon.
- Trubice zdravotnická spojovací (LD-S020) o délce 56 cm (možné barvy dodávaných trubic: černá, červená, modrá, fialová, zelená) - 1 kus.
- Binaurální trubice (LD-S019) - 1 kus.
- Nástavce do uší (LD-S066) - 1 komplet.

Rozměry v balení, mm: 240 x 110 x 40

Hmotnost bez balení, g: 85

LD PROF-IV

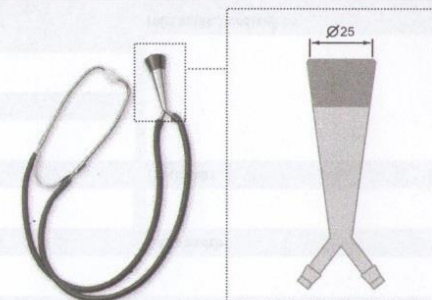

Popis: stetoskop LD Prof-IV je specializovaný porodnický stetoskop, který se skládá z hlavice ve tvaru zvonu, spojovací trubice, binaurálních trubic a nástavců do uší.

Obsah balení:

- Hlavice k stetoskopu (LD-S038) lehká kovová kuželovitěho tvaru s plastovým zvonek - 1 kus. Průměr zvonu - 25 mm.
- Trubice zdravotnické spojovací (LD-S039) - dvě zvukově vodivé trubice z latexu o délce 56 cm (možné barvy dodávaných trubic: černá, modrá, fialová, zelená) - 1 komplet.
- Binaurální trubice (LD-S019) - 1 kus.
- Nástavce do uší (LD-S066) - 1 komplet.

Rozměry v balení, mm: 240 x 110 x 40

Hmotnost bez balení, g: 115.

